



Panel de Prueba de Pantalla Multi-Droga Una Etapa (Orina)

USO PREVISTO

El panel de prueba de la pantalla del tope de la Multi-Droga una de KnowNo (orina) es un immunoassay cualitativo rápido. El panel proporciona los resultados preliminares para la detección del abuso potencial de uno más drogas. Vea la lista abajo. Esto no es un panel de la investigación para supervisar uso de la modificación de la prescripción. Está para el uso casero diagnóstico in vitro. No para el uso interno.

Abreviatura	Prueba
ANF	Anfetamina
COC	Cocaína
MET	Methamfetamina
OPI	Narcoticos
THC	Marihuana/Hashish

El KnowNo™ un panel de prueba de la pantalla del paso (orina) muestra que la droga estaba o que no estaba presente en el nivel del atajo.

El panel de prueba proporciona un resultado de la prueba preliminar. Los resultados positivos se deben confirmar por un método analítico más específico. Siga las instrucciones en la "que envían muestra para la sección de la confirmación" si usted consigue un resultado positivo.

CONTENIDO DEL CONJUNTO

IMPORTANTE: No abra la bolsa hasta que es listo para realizar la prueba.


- 1 taza de la colección
- 1 caja del correo
- 1 bolsa del correo con el tejido fino absorbente
- 1 Manual De Instrucción De Prueba
- 1 panel de prueba sellado en bolsa de la hoja

PRECAUCIONES

- Siga las instrucciones de obtener exactamente resultados exactos.
- Almacene el panel de prueba n la bolsa sellada hasta que este listo para ser usado.
- No utilice los dispositivos expirados.
- Almacenar el dispositivo de la prueba encima de 86°F puede acortar su vida útil.
- Deseche de todos los especímenes y dispositivos usados según local, estado y regulaciones federales.
- No reutilice el panel de prueba.
- No utilice la prueba si usted es color-blind.
- Para el uso diagnóstico in vitro solamente. No para el uso interno.

ALMACENAMIENTO

- Almacene el conjunto en la temperatura ambiente 59-86°F, o si desea almacenarlo por longo tiempo, tiene que ser a temperature 35.6-59°F.
- No abra la bolsa sellada hasta que este listo para ser usado.
- No congele el conjunto de la prueba. No esponga el conjunto de la prueba a las temperaturas sobre 86°F.

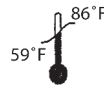

LA COLECCIÓN DE MUESTRA Y LA MANIPULACIÓN


- Recoja la muestra de la orina en el envase proporcionado. Utilice solamente el envase proporcionado este conjunto. No combine las muestras de la orina. Recoja la orina hasta la línea máxima indicada del terraplén.
- No deseche la muestra de la orina hasta que se ha leído la prueba.
- Pruebe la muestra de la orina en el plazo de ocho (8) horas de la colección de la orina. Envíe la misma muestra para la confirmación del laboratorio (si se obtiene el resultado positivo preliminar) en el plazo de 24 horas.

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN

IMPORTANTE: Traiga el panel de prueba y la muestra de la orina a la temperatura ambiente antes de hacer la prueba.

1. Quite el contenido del envase (caja). Fije la caja a un lado. Usted puede utilizarla como caja de envío para la prueba confirmativa más adelante.

2. Cerciórese de que la bolsa esté en la temperatura ambiente antes de abrirse.
3. Encuentre un lugar bien iluminado para observar el cambio del color en el panel de prueba.
4. Tenga un reloj o un contador de tiempo listo.
5. Quite el panel de prueba de la bolsa sellada.
6. Etiquete el panel con la identificación del paciente y la fecha que hizo la preuba. Utilice el panel cuanto antes.
7. Saque el casquillo fuera del extremo de la prueba con las flechas que señalan hacia el espécimen de la orina. Sumerja el panel de prueba verticalmente en el espécimen de la orina por lo menos 10-15 segundos. Sumerja el panel de prueba en orina asegurándose de que no toca la cubierta plástica (según lo indicado en el panel de prueba). No pase las flechas en el panel de prueba al sumergir el panel. Vea la ilustración abajo.

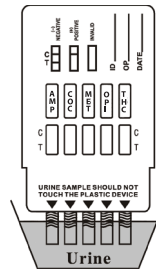

Nota: Sumerja el panel de prueba por lo menos al nivel de líneas onduladas en la cinta (s).

20 ml volumen de orina

8. Comience el contador de tiempo.
9. Quite el panel de prueba de la muestra de la orina después de 10-15 segundos.
10. Sustituya el casquillo detrás sobre el dispositivo. Fije el dispositivo en una superficie limpia y nivelada.
11. Resultados de la prueba leída en todas las cintas de prueba entre 4 y 7 minutos.



IMPORTANTE: No lea los resultados antes de 4 minutos o después de 7 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Cada cinta de prueba se etiqueta con las abreviaturas para una prueba. Por ejemplo, "COC" está para la prueba de la cocaína. Una lista completa para cada prueba se puede encontrar en las preguntas y contesta a la sección de este librete.

IMPORTANTE:


- **Lea cada prueba independientemente.**
- **No compare la intensidad del color de una prueba a otra.**
- **No compare la intensidad del color de la línea T a la línea C.**

1. Compruebe que la prueba esté trabajando correctamente.

El área entre las dos letras C en cada lado de la ventana se llama la región del control. Una línea del color en la región del control se llama línea C. El área entre las dos letras T se llama la región de la prueba. Una línea del color en la región de la prueba se llama línea T.

Para que la prueba trabaje correctamente, la línea C debe aparecer en el plazo de 4 minutos. Si la línea C no aparece en el plazo de 4 minutos en una cinta de prueba, la prueba no está trabajando correctamente. El resultado es inválido. En este caso, repita la prueba con un nuevo dispositivo. Si la prueba sigue siendo inválido usando el segundo dispositivo, contacte Know Inc. en 1-888-KNOW-NO-8.

En el ejemplo abajo, porque no hay línea del color en la región del control o la región de la prueba en la prueba para OPI y por lo tanto él es inválido. En la prueba para THC, una línea aparece en la región de la prueba solamente y no hay línea C, por lo tanto esta prueba es inválida.

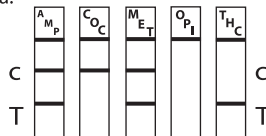


Inválido para los narcoticos y THC (marihuana).

2. Prueba leída solamente si la línea C aparece en el plazo de 4 minutos.

Negativo:

Si la línea C y la línea T aparecen en una prueba, la muestra de la orina es negativa para esa droga.

Si la línea C y la línea T aparecen para todas las pruebas, la muestra de la orina es negativa para todas las drogas probadas. En este caso, no se requiere ninguna otra prueba.

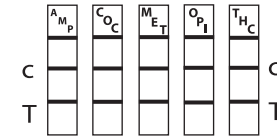


Negativa para todas las drogas probadas

Nota: Incluso una línea muy débil de T es negativa.

Positivo Preliminar:

Si aparece la línea C y no hay línea T en una cinta de prueba, la muestra de la orina puede contener esa droga particular. En este caso, usted debe tomar la segunda medida y enviar la muestra al laboratorio para la confirmación. La prueba adicional por una técnica de laboratorio más exacta tal como espectroscopía del gaz chromatografía/mass (GC/MS) o espectroscopía líquida del alto rendimiento Chromatografía/mass (HPLC/MS) será realizada. Más de una prueba puede ser positivo preliminar.

En el ejemplo abajo, porque hay solamente línea C pero ninguna línea T en la prueba para COC y RESUELTA, los resultados de la prueba son positivo preliminar para ambas drogas.

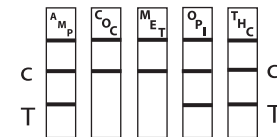

Positivo preliminar para la cocaína y Methamfetamina.

Nota: Si usted consigue un resultado positivo preliminar, usted debe tomar la segunda medida y enviar la muestra al laboratorio para la confirmación.

ENVIAR LA MUESTRA PARA LA CONFIRMACIÓN

Si usted consigue un resultado positivo preliminar, envíe la muestra al laboratorio para la confirmación cuanto antes después de los pasos abajo.

1. Capsule el frasco firmemente.
2. Complete la etiqueta de la prueba de la confirmación:
 - a. Compruebe el positivo probado droga en la etiqueta de la prueba de la confirmación. Por ejemplo, si "THC" era positivo probado en la prueba de investigación, ponga un "X" al lado del "THC".
 - b. Escriba la fecha que usted recogió la muestra de la orina en "la fecha _____" de la colección de la muestra.
3. Ponga la etiqueta de la prueba de la confirmación sobre el lado del frasco.
4. Guarde la porción superior de la etiqueta para sus expedientes. Usted necesita el número de identificación conseguir resultados del laboratorio.
5. Coloque el frasco en el bolso del espécimen con un cojín absorbente. Selle el bolso.
6. Coloque el bolso plástico sellado en la caja de envío.
7. El cierre y sella la caja.
8. Envíe la muestra por entrega próxima/expreso al laboratorio de la prueba. Llame 1-888-KNOW-NO-8 Lunes-Viernes 9:00 a 6:00 P.M. EST para la ayuda adicional.

CONSEGUIR RESULTADOS DEL LABORATORIO

1. Usted puede conseguir normalmente resultados de la prueba dentro de 3-10 días laborales después de que usted envíe su muestra.
2. Tenga el número de identificación listo.
3. Llame 1-888-KNOW-NO-8 lunes a viernes de 9:00 al 6:00 P.M (EST).
4. Identifíquese con el número de identificación.

5. El laboratorio le dará los resultados para esas pruebas que usted marcó en la etiqueta.

6. La etiqueta de la prueba guardará los resultados de la prueba por treinta días. Usted debe llamar dentro treinta días después de que usted ha enviado la muestra para conseguir sus resultados. Los resultados de la prueba se desechan 30 días.

LIMITACIONES

- Las direcciones no siguientes pueden dar lugar exactamente a resultados inexactos de la investigación.
- Esta prueba proporciona un resultado de la investigación. Un resultado positivo indica la presencia del amperio, de COC, RESUELTO, de OPI, de THC, y/o de sus metabolitos en la orina. No refleja el grado de intoxicación.
- La prueba proporciona solamente un resultado de la prueba preliminar. Usted debe utilizar un método más específico para obtener un resultado confirmado.
- Este producto está para probar la orina humana solamente. No utilice este dispositivo para probar todo menos la orina.
- La muestra de la orina es perecedera. Si usted necesita una prueba confirmativa, envíe la muestra al laboratorio cuanto antes. Para otros detalles sobre la prueba de laboratorio, llame 1-888-KNOW-NO-8.
- Los adúlteros tales como blanqueo u otros agentes que oxidan fuertes pueden producir resultados de la prueba erróneos. Cuando está sospechado, recoja una muestra fresca y repita la prueba con una taza nueva.
- No utilice las muestras sospechadas de la contaminación bacteriana. Los contaminantes pueden interferir con la prueba y causar resultados falsos.
- Es posible que las sustancias y los errores procesales no descritos en esta instrucción pueden interferir con la prueba, causando resultados falsos.
- Los ciertos alimentos y remedio tal como jarabe de la tos, píldoras de la dieta, y suplementos alimenticios pueden causar un resultado de la prueba positivo falso con este dispositivo.
- Esta prueba no distingue entre las drogas del abuso y ciertas medicaciones.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. Qué hace el Panel de Prueba de Pantalla Multi-Droga Una Etapa (Orina)?

El panel de prueba es una prueba de la pantalla de la droga. Proporciona los resultados preliminares para la detección de una más de las drogas en el nivel del atajo:

Abreviatura	Prueba
ANF	Anfetamina
COC	Cocaína
MET	Methamfetamina
OPI	Narcoticos
THC	Marihuana/Hashish

2. Cuál es nivel del atajo?

El nivel del atajo es la concentración especificada de una droga en una muestra de la orina. Encima de esa concentración la prueba se llama positivo, y debajo de esa concentración se llama negativa.

3. Cuáles son drogas del abuso?

Los ejemplos de drogas del abuso incluyen la marihuana, la cocaína, los Narcoticos, la heroína, las anfetaminas, ecstasy, y phencyclidine. Las drogas de la prescripción, tales como morfina, codeína u otras píldoras para dolor, también pueden ser absorbidas.

4. Nombres comunes de la calle para las drogas

Droga	Nombres comunes de la calle
Amfetamina	Speed, Amp, Chalk
Cocaína	Big C, Coke, Snow, Flake, Candy, Crack, Blow, Rock
Methamfetamina	Crystal-Meth, Ice, Glass, Ecstasy, X, E
Narcoticos	Heroína, H, Hairy hombre, Horse, Jones, Scag
Marihuana (THC)	Pot, Weed, Herb, Bud, MF, Doobie, Reefer, Grass joint, Homegrown, Spliff

5. Cuanto tiempo se pueden detectar las drogas en orina?

Los siguientes son pautas solamente. Los tiempos pueden variar importante de estas estimaciones dependiendo de cuánto tiempo la persona ha estado tomando la droga, de la cantidad de droga que utiliza, o del metabolismo de la persona.

Droga	Tiempos de Detección	
	Mínimo	Máximo
Anfetamina (Speed)	4-6 horas	2-3 días
Methamfetaminas (Ecstasy, X, E)	4-6 horas	2-3 días
Cocaína (Crack)	2-6 horas	2-3 días
Heroína (Nacróticos)	2-6 horas	1-3 días
Marihuana (Pot)	1-3 horas	1-7 días

6. Exactitud de la prueba?

La prueba es bastante sensible a la presencia de drogas en la orina. Esto significa que si las drogas están presentes, usted conseguirá generalmente un resultado positivo preliminar. Si usted consigue un resultado positivo preliminar, usted debe enviar la muestra de la orina al laboratorio para una prueba más exacta.

Es muy importante enviar la muestra de la orina al laboratorio, porque puede que que la prueba de drogas del abuso de investigación en la orina de resultados positivos cuando no hay drogas realmente presentes. Ciertos alimentos, los suplementos del alimento, las bebidas, las píldoras de la dieta, o el remedio sin receta pueden causar una reacción con las pruebas. Las pruebas que se hacen en los laboratorios son un 100% por 100% seguras y determinas si hay indicio de drogas presentes.

Muchas cosas pueden afectar la exactitud de esta prueba, incluyendo lo siguiente:

- La manera que la prueba fue hecha
- Almacenamiento de la prueba o la orina
- Bebidas o alimentos ingeridos minutos antes de la prueba
- Prescripciones o drogas sin recetas que la persona haya tomado antes de la prueba

118 consumidores participaron en un estudio. Los resultados del estudio se resumen abajo. 19 de los 22 resultados incorrectos están en las concentraciones de la droga en 50%~ 150% de los atajos. 2 muestras positivas fueron leídas negativas. 2 muestras negativas fueron leídas positivas .

Droga	Máximo Conc. (ng/ml)	# Prueba	Interpretación de resultado	
			Correcto	Correcto
AMP	1000	592	585	7
COC	300	592	590	2
MET	1000	592	588	4
OPI	2000	592	587	5
THC	50	592	588	4

7. Si los resultados de la prueba son negativos, se puede ser seguro que la persona no tomó la droga?

No, existing varios factores que pueden hacer la negativa de los resultados de la prueba aunque la persona está utilizando las drogas. Porque

- Usted pudo haber probado para las drogas incorrectas.
- Usted pudo no haber probado la orina cuando contuvo las drogas para aparecer en la orina después de que una persona las tome, y no permanecen en la orina indefinidamente. Usted puede haber recogido la orina demasiado pronto o ser detectado demasiado tarde.
- La persona agregó con conocimiento algo a la orina evitar que reaccione con los productos químicos de la prueba.
- Los productos químicos en la prueba fueron malo porque fueron almacenados incorrectamente o pasaron su fecha de vencimiento.

Si usted consigue un resultado negativo, pero todavía sospecha abuso de la droga, usted puede probar otra vez en un rato más último. Debe también considere el probar de otros tipos de drogas. Hable con su doctor si necesita más decidir de la ayuda qué pasos a tomar después.

8. Cuál es resultado positivo falso?

Un resultado positivo falso es un positivo leído de la prueba de investigación cuando la droga o el metabolite de la droga no está presente o su concentración es menos que el nivel del atajo.

9. Qué medio preliminar del positivo de la gama?

El panel de prueba de la pantalla del paso de la Multi-Droga una es una prueba de investigación. Es el primer paso en un proceso de dos etapas. Las pruebas de investigación no son tan exactas como prueba de laboratorio. Es posible conseguir un resultado positivo cuando la persona no tomó las drogas. Por ejemplo, un poco de remedio y alimento pueden hacer las pruebas de investigación leer incorrectamente el positivo. Las cosas tales como píldoras de la dieta, inhaladores y jarabe de la tos pueden causar un resultado positivo. Usted consulta con su doctor para entender mejor cómo las medicaciones pueden interferir con esta prueba.

10. Qué si el prueba de laboratorio confirma un resultado positivo?

El laboratorio utiliza equipo muy exacto y confiable funcionar las pruebas. Si el laboratorio divulga un resultado positivo, significa que la droga estaba presente en la muestra de la orina. Pero no asuma que la muestra de la orina vino de un abusador de la droga.

Considere todos los resultados de la anfetamina cuidadosamente, incluso ésos del laboratorio. Algunas medicaciones sin recetas contienen las anfetaminas que no pueden ser distinguidas de las anfetaminas ilegal abusadas.

• Si usted recibió un resultado positivo y usted no cree la prueba, consulte a su doctor. Tiene su historial médico y pueden proveer de usted la información detallada.

• Si un resultado positivo fue confirmado, consulte a su doctor para identificar a los consejeros que le ayudarán. Usted puede también hacer contacto con uno de los recursos enumerados abajo para la ayuda.

11. Recursos Adicionales

National Institute on Drug Abuse
Tel: 301-443-1124
www.drugabuse.gov

Center for Substance Abuse Prevention
Substance Abuse and Mental Health Services Administration
Tel: 301-443-9110
www.prevention.samhsa.gov

Centers for Disease Control and Prevention
Tel: 404-639-3534
Tel: 800-311-3435 (gratis)
www.cdc.gov

Safe and Drug-Free Schools Program
U.S. Department of Education
Tel: 800-872-5327
www.ed.gov

National Clearinghouse for Alcohol and Drug Informaiton
Tel: 800-729-6686
www.ncadi.samhsa.gov

National Council on a Alcoholism and Drug Dependence
Tel: 800-622-2255 (gratis)
www.ncadd.org

American Council for Drug Education
Tel: 301-443-3860
www.niaaa.nih.gov

 **Know Inc.**
218 East Bearss Avenue Suite 337
Tampa, Florida U.S.A - 33613

Para ayuda técnica llame:
1-888-KNOW-NO-8
De lunes a viernes 9:00 am a 6:00 pm (EST)
www.knownodrugtest.com